



RIGHTEST CARE

(Puede no estar disponible en su país)

Meter Pairing / Emparejamiento de medidor

Step 1. Download and Install RIGHTEST CARE /

Paso 1. Bajar e instalar RIGHTEST CARE

Step 2. Use phone number to create an account /

Paso 2. Crear una cuenta con su número de teléfono

Step 3. Pair glucometer /

Paso 3. Emparejar el glucómetro

Step 4. Setting up lifestyle /

Paso 4. Configurar su estilo de vida

Step 5. Register for product warranty /

Paso 5. Regístrese para la garantía del producto

Step 6. Set up blood glucose target range for your blood sugar management /

Paso 6. Configure el rango objetivo de glucosa para el control de su azúcar en sangre.

ALL PICTURES SHOWN ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSE ONLY.

ACTUAL PRODUCT MAY VARY DUE TO PRODUCT ENHANCEMENT /

TODAS LAS IMÁGENES MOSTRADAS SON SOLAMENTE PARA FINES ILUSTRATIVOS.

EL PRODUCTO REAL PUEDE VARIAR DEBIDO A LA MEJORA DEL PRODUCTO.

Step 1. Download and Install RIGHTEST CARE /

Paso 1. Bajar e instalar RIGHTEST CARE

Method 1) Scan QR code to download.

Open QR code scanner on your mobile device /

Método 1) Escanear el Código QR para bajarla.

Abrir el escáner del código QR en su dispositivo móvil.



Method 2) Search "RIGHTEST CARE" on App Store or Google Play, download and install /


Método 2) Buscar "RIGHTEST CARE" en la App Store o Google Play, bajarla e instalarla.




Available in particular regions only /
Disponible solamente en algunas regiones particulares.

Step 2. Use phone number to create an account / Paso 2. Crear una cuenta con su número de teléfono


1) Select your country and Enter your mobile phone number /
Seleccionar su país e Ingresar su número de celular.

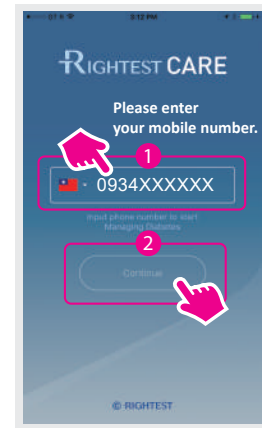


2) Accept terms of use and privacy policy to use the app /
Aceptar los términos de uso y la política de privacidad para usar la App.

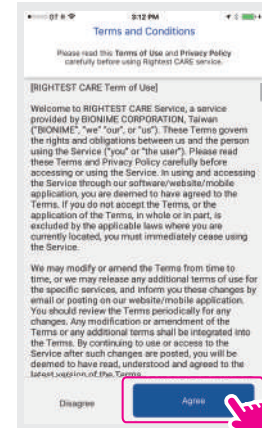


3) System sends out verification code to your phone via SMS /
El Sistema le enviará un código de verificación a su celular por mensaje de texto.

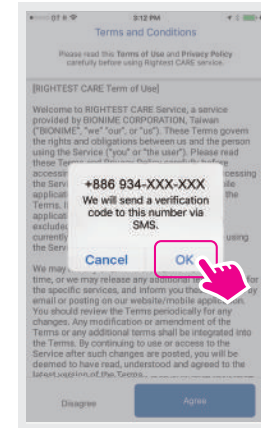

4) Enter SMS verification code /
Ingresar el código de verificación del mensaje de texto.

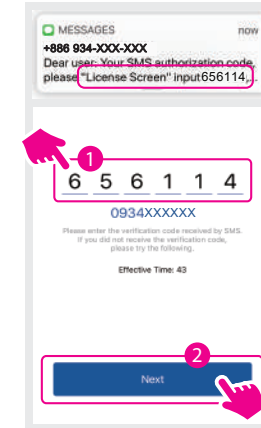

5) Continue to set the user account. Press Continue to set up the account /
Continuar con la configuración de la cuenta del usuario. Presionar Continuar para configurar la cuenta.

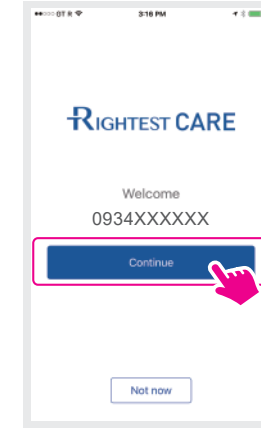

6) Select a profile photo and enter your name /
Por favor, seleccionar su foto de perfil e ingresar su nombre.



7) Select your basic information, click "register" when finished /
Por favor, seleccionar su información básico y haga clic "registrar" cuando esté completado.



Step 3. Pair glucometer / Paso 3. Emparejar el glucómetro


Pairing mode shows on screen after completion of registration. Follow the instructions to pair glucometer /

Modo de emparejamiento aparecerá en la pantalla cuando la registración está completada. Sigla las instrucciones para emparejar el glucómetro.


1) Activate Bluetooth of glucometer before clicking "search" on your mobile device /
Activar el Bluetooth del glucómetro antes de haga clic "buscar" en su dispositivo móvil.




2) Search for nearby meters /
Buscar los medidores cercanos.

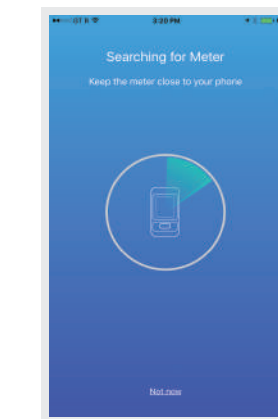


3) Pair your meter by selecting its serial number /
Emparejar su medidor al seleccionar su número de serie.

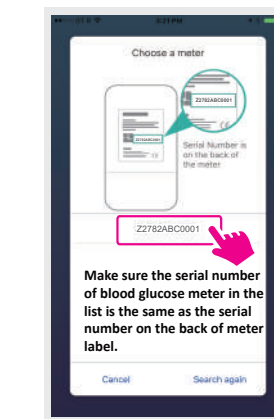


4) Confirm meter serial number /
Confirmar el número de serie del medidor.

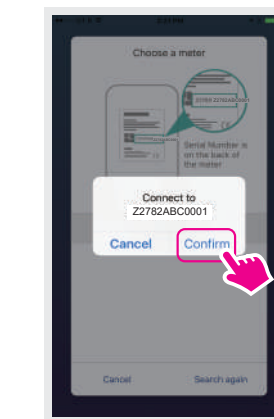


5) **Android:** Pulldown Status bar of mobile, accept Bluetooth pairing request.
iOS: Accept a Bluetooth pairing request /
Android: En la barra del móvil Estatus Desplegable, aceptar la solicitud del Bluetooth del emparejamiento.
iOS: Aceptar la solicitud del Bluetooth del emparejamiento.

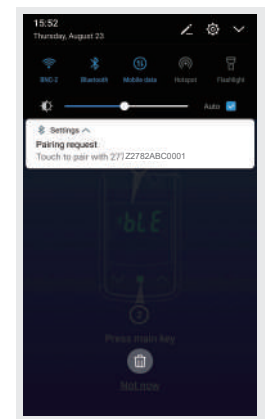


6) Confirm Bluetooth pairing requirements /
Confirmar los requisitos de emparejamiento del Bluetooth.

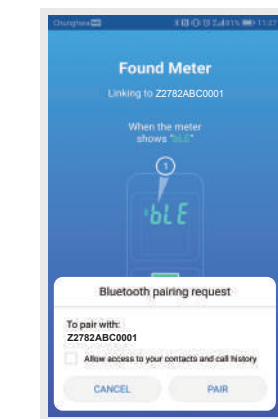


7) Paired successfully /
Emparejamiento exitoso.

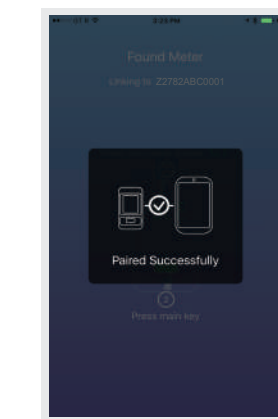

8) Data sync /
Sincronización de datos.

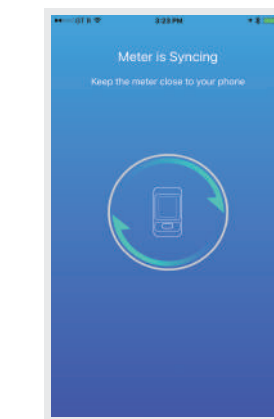


9) The process is now completed /
El procesao está completado ahora.

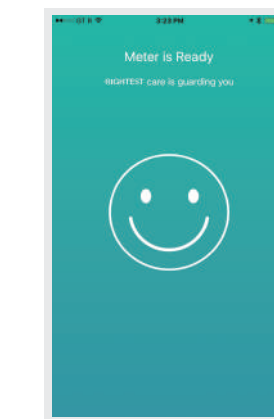


Step 4. Setting up lifestyle / Paso 4. Configurar el estilo de vida

- 1) Set up daily routine /
Configurar la rutina diaria.
- 2) Set up "daily schedule" /
Configurar "el horario diario".
- 3) Confirm daily schedule and select "Me". App will categorize before/after meal blood glucose data by your setting /
Confirmar el horario diario y seleccionar "Yo". La App categorizará el dato de glucemia antes/después de la comida según su configuración.

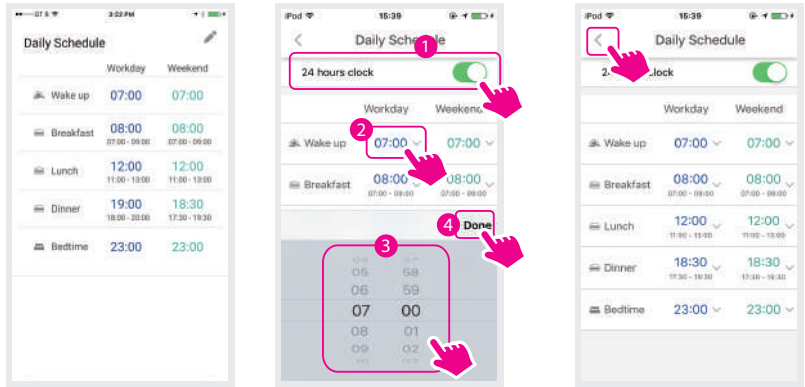

Testing schedule / Calendario de pruebas

- 1) Select "Me", select "Testing Calendar", Confirm Testing Calendar /
Seleccionar "Yo", seleccionar "Calendario de Prueba" y confirmar el calendario de prueba.
- 2) Once finished setting, user will receive notifications when time to perform blood glucose test /
Una vez configurado, el usuario recibirá notificaciones en la hora cuando se debe realizar su medición de la glucemia.

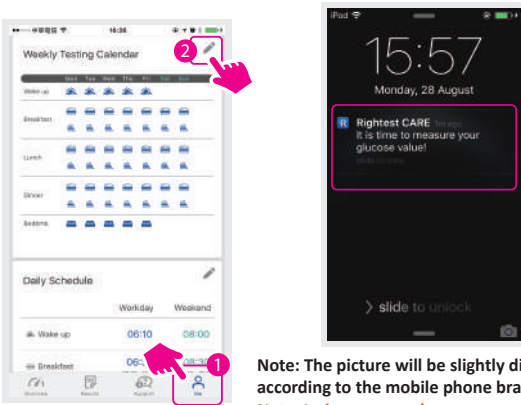

Note: The picture will be slightly different according to the mobile phone brand /
Nota: La imagen puede ser un poco diferente dependiendo de la marca de su teléfono móvil.


Step 5. Personal Setting-Blood glucose report (Only available for US market)

Paso 5. Configuración personal: Reporte de glucosa en sangre (solo disponible para el mercado de los Estados Unidos)

- 1) Click "Blood glucose report" /
Haga clic en "Reporte de glucosa en sangre".
- 2) Choose time interval /
Elija el intervalo de tiempo.

iOS system /
Sistema iOS


Android system /
Sistema Andriod

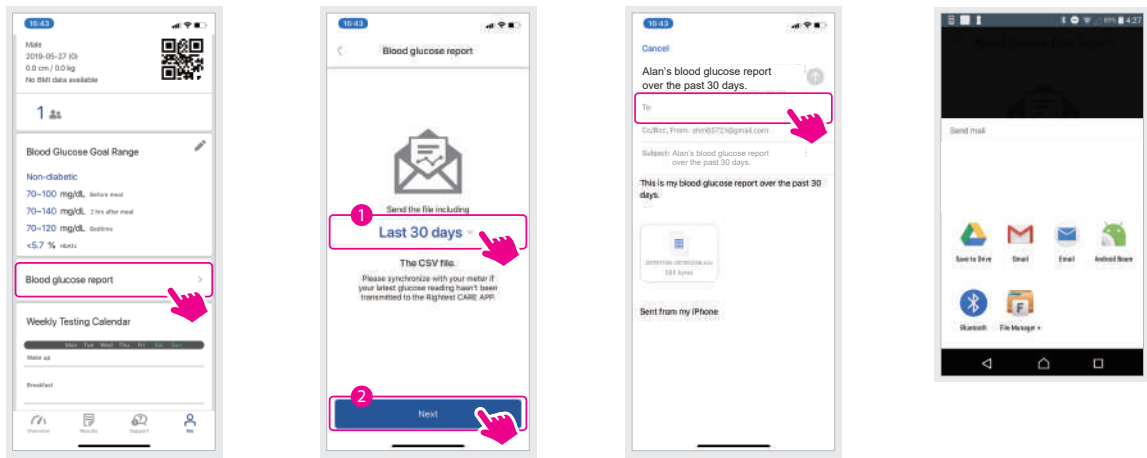

Step 6. Register for product warranty / Paso 6. Regístrese para la garantía del producto

- 1) Click "My Meters" in Me /
Clicquear "Mis Medidores" en Yo.
- 2) Select "Not registered yet" in product warranty field /
Seleccionar "No registrado todavía" en el campo de garantía de producto.
- 3) Select "Register Now" /
Selecione "Registrarse ahora".
- 4) Date of product warranty appears after completion of registration /
La fecha de la garantía del producto aparece tras completar el registro.

Note: You can also register warranty with warranty card in meter package /
Nota: Usted también puede registrar la garantía sin la tarjeta de garantía.

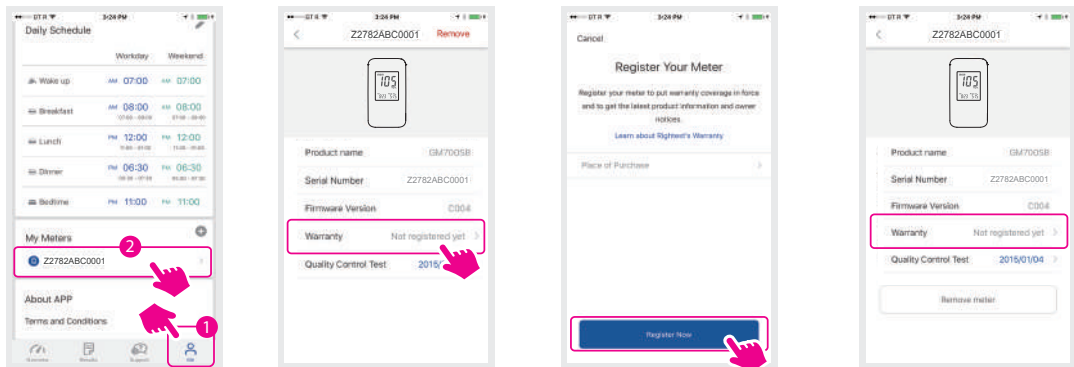

Step 7. Set up blood glucose target range for your blood sugar management /
Paso 7. Configure el rango objetivo de glucosa para el control de su azúcar en sangre.


Select "ME" to set up your blood glucose target range and testing schedule. The blood glucose target range suggested by the ADA is shown and intended to be used as a guide to assist you with your blood glucose management. The settings can be changed. Consult with your physician to determine the target blood glucose goal ranges that are best for you /
Selecione "ME" para configurar su rango objetivo de glucosa en sangre y su programa de pruebas. El rango objetivo de glucosa en sangre sugerido por la ADA es mostrado y está destinado a usarse como una guía para ayudarlo con su manejo de la glucosa en sangre. La configuración se puede cambiar. Consulte con su médico para determinar los rangos objetivos de glucosa en sangre que sean mejores para usted.

Blood Glucose goal range / Rango objetivo de glucosa en sangre

- 1) Select "Me", select "blood glucose goal range" /
Seleccionar "Yo" y el "rango del objetivo glucémico".
- 2) Select your diabetes type, blood glucose goal ranges will be suggested /
Seleccione su tipo de diabetes, se le sugerirán rangos objetivos de glucosa en sangre.
- 3) After blood glucose goal range is completed, select "Me" /
Después de haber configurado la glucemia, seleccionar "Yo".



An intuitive comprehensive visualized dashboard / Un tablero de control visual intuitivo comprensivo

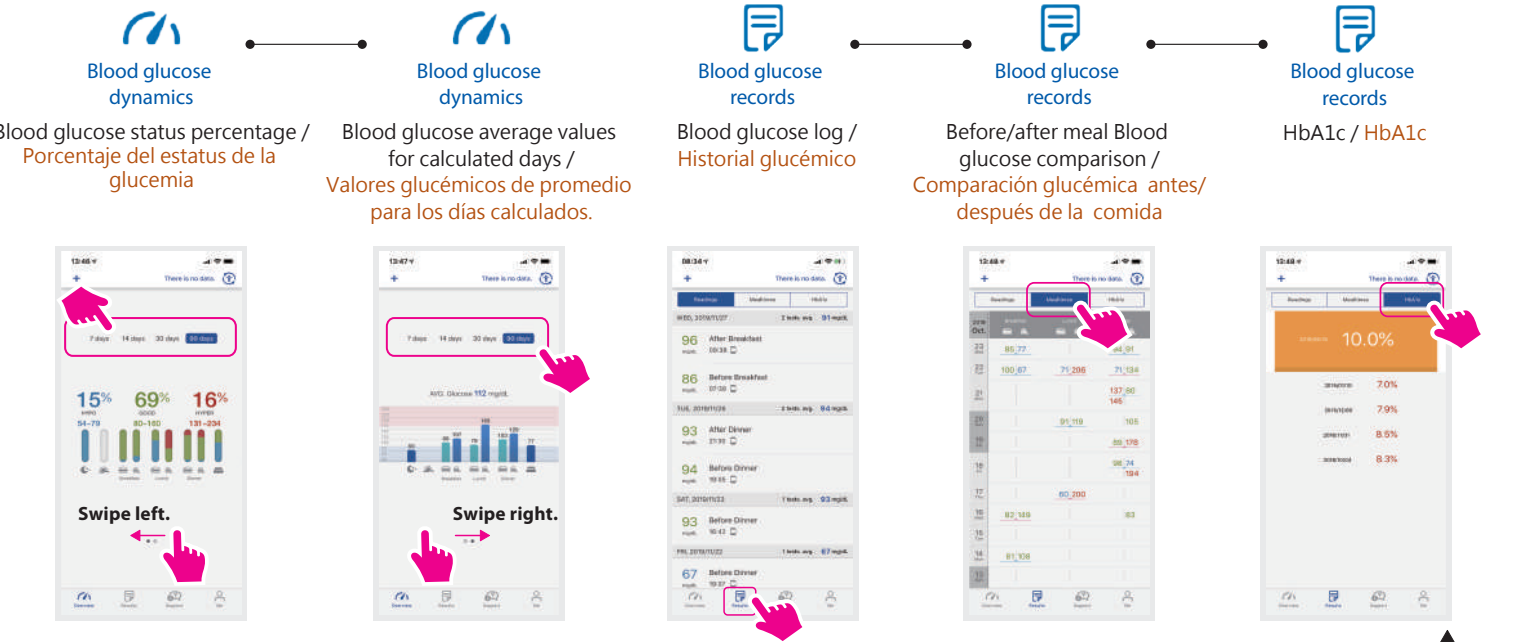

HbA1c (measurement) result can ONLY be obtained from your health care provider /
El resultado de HbA1c (medición) SOLO se puede obtener de su proveedor de atención médica.

How to find more information? / Cómo encuentra más información?

- Step 1) Open RIGHTEST CARE App in mobile device /
Paso 1) Abrir la App RIGHTEST CARE en su dispositivo móvil.
- Step 2) Select "Support" /
Paso 2) Seleccionar "Servicio".



- Step 3) Select topic of interest to receive more information /
Paso 3) Seleccione el tema de interes para recibir más informaciones.

BIONIME
No. 100, Sec. 2, Daqing St., South Dist.,
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 2369 2388
Fax: +886 4 2261 7586
http://www.bionime.com
E-mail: info@bionime.com

Distributed by Bionime USA Corporation
Customer Support Center:
Tel: +1 888 481 8485
Fax: +1 909 781 6970
http://www.bionimeusa.com
Service hours: Mon. to Fri. 8:00 AM to 5:00 PM PST.
Outside of operation hours: contact your healthcare professional.